

# Reoxcare

MAXIMIZING THE NATURAL WOUND HEALING PROCESS

## HIDROGEL PARA PIEL DAÑADA



# Reoxcare Gel

## ¿Qué es Reoxcare Gel?

Nuevo hidrogel con ingredientes de origen natural para el tratamiento de la piel dañada y heridas de diversa etiología.



## Excelentes resultados clínicos

- Capacidad de desbridamiento autolítico
- Protege la piel tanto intacta como dañada
- Alta capacidad de reparación de los tejidos y de cicatrización

\*Ver publicaciones científicas y referencias ([www.reoxcare.com](http://www.reoxcare.com)).

## ¿Cómo utilizar Reoxcare Gel?


- 1 Limpiar la herida cuidadosamente.
  - 2 Aplicar Reoxcare Gel en el área cada 24/48 horas hasta la recuperación completa.
  - 3 Si se considera necesario, cubrir con apósito secundario.
- Reoxcare Gel puede ser utilizado por el propio paciente.

Reoxcare Gel es un producto de un solo uso. No utilizar si el envase está abierto o dañado.  
No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes o a derivados del tomate.

## ¿Qué aporta Reoxcare Gel?


- Hidrata la piel
- Efecto filmógeno
- Facilita la eliminación de tejidos no viables presentes en el lecho de la herida
- Protege la piel sana de la exposición continua a la humedad y repara la piel dañada tras agresiones

## Óptima viabilidad de las células de la piel

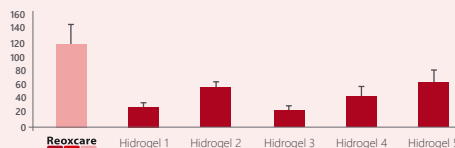

Reoxcare Gel mantiene de forma óptima la viabilidad de los fibroblastos, contribuyendo a la reparación de la piel y las heridas.

## Formación de un film protector flexible

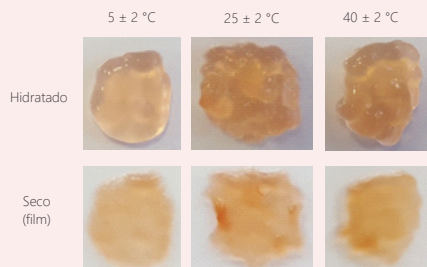

Reoxcare Gel genera un film resistente y flexible, que protege la piel frente al ambiente externo.

## Casos clínicos



### Úlcera vascular mixta superficial

73 años, EAP, IRC, fumador.  
Mala tolerancia a los materiales de cura.



Inicio



Semana 3



Semana 11

2 años en evolución.

#### Tratamiento previo

Apósito hidrodetersivo + apósito reductor de metaloproteinasas.

#### Tratamiento con Reoxcare Gel

Limpieza + Reoxcare Gel + apósito de hidrofibra de hidrocoloide con plata + terapia compresiva.



### Picadura de araña


77 años con leucemia mieloide crónica.  
Síndrome mielodisplásico, depresión, artritis reumatoide.



Inicio



Semana 2

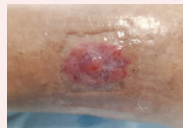

Semana 6

2,5 meses en evolución.

#### Tratamiento previo

Clorhexidina + apósito de hidrofibra de hidrocoloide con plata + vendaje de protección.

#### Tratamiento con Reoxcare Gel

Desbridamiento cortante + Reoxcare Gel + apósito de espuma de poliuretano.




### Quemadura de grado II

54 años. Lesión por escaldadura.



Inicio

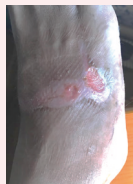

Semana 2



Semana 4

1 mes en evolución.

#### Tratamiento previo

Crema con sulfadiazina argéntica y antibiótico oral.

#### Tratamiento con Reoxcare Gel

Limpieza con solución salina + Reoxcare Gel + apósito hidrodetersivo con plata o regulador de proteasas + vendaje protector.

## Casos clínicos



### Sinus pilonidal

22 años. Asma. Broncoespasmo.  
Alergia. Reintervenido de sinus pilonidal.



Inicio



Semana 6



Semana 7

3 meses en evolución.

### Tratamiento previo

Múltiples tratamientos inefectivos.  
Clorhexidina + apósito de cloruro de diaquilcarbamillo + apósito de sujeción.

### Tratamiento con Reoxcare Gel

Desbridamiento cortante + Reoxcare Gel  
+ apósito antimicrobiano con plata  
+ apósito de espuma.



### Úlcera neuropática en pie de Charcot


51 años. Diabetes mellitus.



Inicio



Semana 3

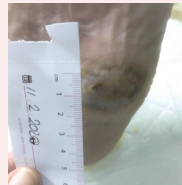

Semana 11

6 meses en evolución.

### Tratamiento previo

Cura diaria con apósito de cura en ambiente húmedo por alto exudado seroso.

### Tratamiento con Reoxcare Gel

Limpieza + Reoxcare Gel + apósito de hidrofibra de alcohol de polivinilo + apósito de espuma adhesiva + descarga.



### Herida quirúrgica

53 años. Trasplante renal. Diálisis peritoneal.  
Intervenido de fístula arteriovenosa húmerobasílica.



Inicio



Semana 2



Semana 6

1 mes en evolución.

### Tratamiento previo

Crema con sulfadiazina argéntica.  
Posteriormente, apósito desbridante  
+ apósito de hidrofibra + vendaje.

### Tratamiento con Reoxcare Gel

Desbridamiento cortante + Reoxcare Gel  
+ apósito de espuma de poliuretano hasta  
el cierre de la herida.



## Casos clínicos



### Lesión traumática

2 años. Epidermólisis Bullosa Simple



Inicio

Día 3

### Tratamiento previo

Sin tratamiento previo.

### Tratamiento con Reoxcare Gel

Durante el día, aplicación de Reoxcare Gel + Apósito de espuma fino + malla tubular.

Por la noche, aplicación de Reoxcare Gel dejando la herida al aire.

Aplicaciones cada 24 h.



### Lesión traumática

8 años. Cicatrización compleja por absceso



Inicio

Semana 2

1 semana en evolución.

### Tratamiento previo

Desbridamiento y protección con apósito de gasa

### Tratamiento con Reoxcare Gel

Reoxcare Gel + protección con apósito de gasa



### Lesión relacionada con la dependencia

81 años.



Inicio

Semana 5

Semana 10

2 meses en evolución.

### Tratamiento previo

Colagenasa, apósito hidrodetersivo con plata y 1 semana de antibiótico sistémico

### Tratamiento con Reoxcare Gel

Inicio: Reoxcare Gel con apósito hidrodetersivo con plata. Cambios cada 48 h

Semana 5: Reoxcare Gel + apósito de cura húmeda sin plata.

¡Conoce más de Reoxcare en nuestra página web!



Fabricado por: **histocell**  
REGENERATIVE MEDICINE

Histocell, S.L.  
Parque Tecnológico 801, 2º  
48160 Derio (Bizkaia) España  
T. +34 94 656 7900 | [reoxcare@histocell.com](mailto:reoxcare@histocell.com)  
[www.histocell.com](http://www.histocell.com)

CAT-RXG-131/V03

CE 0318